

リアルタイムPCR

発売記念

スペシャルキャンペーン!

NEW

希望小売価格（税抜）


¥2,850,000




キャンペーン特別価格（税抜）

¥1,980,000

30%
off

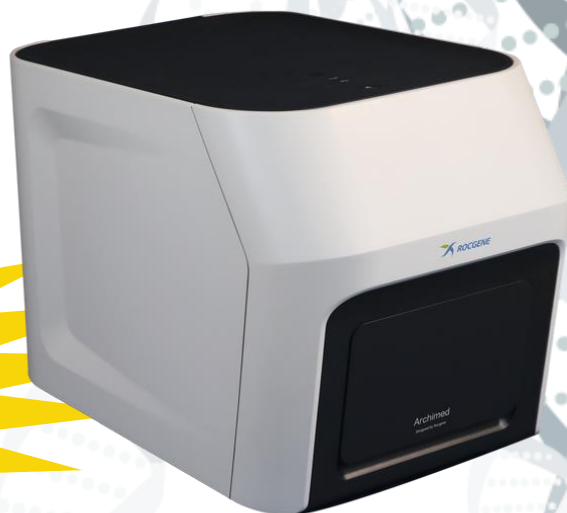


96well 蛍光4色測定! リアルタイムPCR Archimed R4

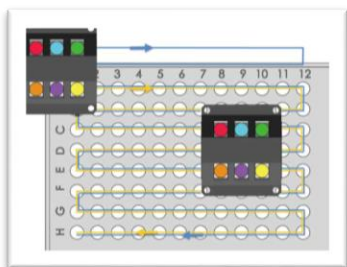


優れた光学系

一般的なPDやCCDよりも高感度な検出器MPPCを使用。
各蛍光フィルターが物理的に離れているため、ウェル間クロストークを抑制。

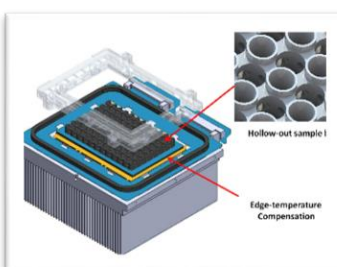

迅速で安定した温度制御

独自形状の金属製ホローブロックによる迅速な温度変化。
熱伝導性カーボンフィルムと補助加熱プレートによるエッジ温度補正機能で高い温度均一性を実現。

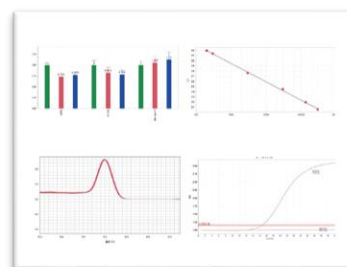

豊富なアプリケーション

絶対定量や相対定量だけでなく、標準ソフトでHRM解析やThermal Shift Assay解析が利用可能。

キャンペーン期間

2025年 **9/1**



2026年 **1/31**

*制御用PCは付属していません。

*こちらのキャンペーンは予告なく終了する可能性があります。

*価格、仕様は予告なく変更となる場合があります。

製品名	Archimed R4	
ブロックウェル数	96 well	
蛍光	4 色	
励起波長/検出波長	455-650 nm/510-715 nm	
検出器	高感度シリコンフォトマルチサプライヤ (MPPC)	
検出可能蛍光色素	F1:FAM/SYBR® Green I	F2:VIC/HEX
	F3:ROX	F4:Cy5/LIZ
温度ランプ (最大、平均)	≧6.0℃/秒、≧4℃/秒 (変更可能)	
温度均一性	≦± 0.1℃	
重さ	25 kg	
大きさ (L×W×H)	52 × 35 × 37 cm	
電源	100-240 VAC, 50-60 Hz, 750 W	

*PCは別売りとなります。

*価格と仕様は予告なく変更になる場合があります。

リアルタイムPCR試薬には Agilent社 BrilliantⅢ がオススメ！



詳細はコチラ！



- ・ qPCR用に変異導入して高速化したTaqポリメラーゼによって、40分以内の反応時間
- ・ 改良された高速ホットスタートが反応時間を減らし、プライマーダイマーの生成を減少

Brilliant III Ultra-Fast SYBR® QPCR MasterMix

■ SYBR® Green I 検出用

製品タイプ	アズワン品番	型番	定価
通常タイプ	89-7107-26	600882	¥19,000
1-step RT-PCR	89-7107-32	600886	¥138,000

■ 価格表に記載の価格は全て税抜価格です

■ その他Low・High ROXタイプやまとめ買いセットなど取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください

Brilliant III Ultra-Fast QPCR MasterMix

■ プローブ検出用

製品タイプ	アズワン品番	型番	定価
通常タイプ	89-7107-43	600880	¥36,000
1-step RT-PCR	89-7107-49	600884	¥121,000

All image and text in this page is:© Agilent Technologies, Inc. / Reproduced with Permission, Courtesy of Agilent Technologies, Inc.

アズワン株式会社

■ ライフサイエンスグループ
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1 5F
 TEL:03-6222-0285 FAX:03-6222-0270
 MAIL: bio@so.as-1.co.jp

お問合せはこちらから！



■ お近くの販売店へお問い合わせください